

LUXCEAR Visage 品質保証書

この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日、
発送元を販売店とさせていただきますので送り状もあわせて大切に保管してください。
※印欄に記入の無い場合および販売店の確認が取れない場合は、すべて無効とさせていただきます。

製品名	ルクセア ヴィサージュ		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
※お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	電話 ()
※販売店	住所 店名 電話	〒	

<保証規定>

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。定期点検及び無償修理期間経過後の修理等については有償と致します。

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げ販売店または「お問い合わせ先」に修理をご依頼ください。無償修理させていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合も「お問い合わせ先」までご相談ください。
- この保証書は、本製品を日本国内でご購入かつご使用される場合にのみ有効です。
(This warranty is applied to products purchased and used solely in Japan)
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理になります。
 - 取扱説明書に記載されていない誤った使用方法および不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後、お客様ご自身での輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、不慮の事故、およびその他天災による損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店などの記入がない場合、および確認が取れない場合。
 - 本書の記載内容が書き換えられた場合。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ等の保管上の不備による損傷。
 - 消耗品の交換。
- ご贈答品等で本保証書および送り状に記載してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には「お問い合わせ先」へ直接ご相談ください。

☆お客様の個人情報のお取り扱いについて、お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
☆この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明な場合は、直接「お問い合わせ先」へご相談ください。

発売元: 株式会社コニー 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15
お問い合わせ先: 06-6262-0555 受付時間: 10:00 ~ 17:30(土日祝日を除く)

修理記録

LUXCEAR Visage

取扱説明書



安全上のご注意

●この製品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前は必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後は手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。


図記号の例	
	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容は○の中や近くに文章や絵で示します。左図は「分解禁止」を示します。
	この記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な内容は、近くに文章で示します。左図は「特定しない一般的な使用者の行為」を示します。
⚠ 危険 → 守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容	
	●誤動作を招く恐れがありますので、次のような医療用電子機器との併用は絶対にしないでください。①ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器②人工心肺などの生命維持用電子医療機器③心電計などの装着型の医療用電子機器●火傷や感電の恐れがありますので指定以外の誤ったご使用をなさらないでください。●故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。
⚠ 警告 → 守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容	
	次のような方または部位は、絶対にご使用にならないでください。＜人＞●心臓に疾患がある人●医師の治療を受けている人●幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人●急性疾患／有熱性疾患／感染性疾患／結核性疾患の人●神経痛の人●ケロイド体質の人●金属アレルギーの人●内臓疾患の人●その他体調がすぐれない人(37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき)●皮膚に異常がある人(アトピー性皮膚炎の人・アレルギー体質で特に肌に敏感な人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビ、炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な《内臓疾患などによる》シミのある人)●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人●ぜんそくの人●血友病患者●悪性腫瘍のある人●飲酒中や薬を服用中の人●疲労の激しい人●痛覚・知覚に障害のある人●妊娠中の人●授乳中の人●部位＞●頭●心臓の周囲15cm以内●喉仏●眼球、口内、陰部などの粘膜の部位●肝斑●皮膚疾患のある部位●傷口●黒皮症●体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位●整形手術をした部位●指定部位以外※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
	●本体に異常を感じた場合は、ただちに電源を切りご使用を中止して発売元に連絡してください。●指定の使用以外での目的にはご使用にならないでください。●感電事故の恐れがありますので、他の電気製品(美容器など)との同時使用はしないでください。●火災・感電・故障の原因になりますので異物を本体内部に入れないでください。●強いショックを受ける恐れがありますので必ず身に付けている全ての金属類(ベルト・ネックレスなど)を外してください。●ヘッドをお肌へ強く押し付けたり、1カ所へ長時間固定したままにしないでください。●ヘッドが高温になる場合がありますので電源を入れた状態で放置しないでください。●オーナ(トリートメント)の恐れがありますので、同一部位の過度なお手入れは避けてください。●過剰な連続使用(業務用としてのご使用など)しないでください。●就寝時にはご使用にならないでください。●故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。●引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くでご使用にならないでください。
	充電後は必ずコンセントからアダプターを抜いてください。また、濡れた手で抜き差しはしないでください。守らないと火災や発火の恐れがあります。
	修理・分解・改造は行わないでください。感電及び異常動作により、身体に重大な被害を与える恐れがあります。
⚠ 注意 → 守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容	
	次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)特に発赤・カブレなどの皮膚の異常を感じたら直ちにご使用を中止してください。●感電などの恐れがあるのでご自分での点検は絶対に行わないでください。●破損した製品はご使用にならないでください。●本体・スタンド・アダプターの上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えないでください。●お手入れをするときはシンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などはご使用にならないでください。●ご使用中に停電または雷が鳴りだしたら、ただちにご使用を中止してください。●付属のアダプター以外はご使用にならないでください。●アダプターコードは極端に折り曲げたり引っ張ったりしないでください。●必ず交流100～240Vでご使用してください。(保証は国内のみ)●故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。また、サウナや岩盤浴などへは持ち込まないでください。

	温度・湿度の高い所での保管はおやめください。強い電気ショックを受けたり、やけどや感電の恐れがあります。	強い痛みを感じる方は、ご使用をお控えください。
	乳幼児の手の届かない場所で保管してください。	充電電池の消耗を抑えるため、長期間ご使用にならない場合でも1ヵ月に1度、充電することを推奨します。
	直射日光の当たらない場所で保管してください。	本製品を強力な電磁波を発生する電気用品(電子レンジ・IH調理器・スチーマーなど)の近くでご使用にならないでください。
長期間ご使用にならない場合は、本体の掃除をしてから保管してください。		不安定な場所には保管しないでください。
ご使用しない場合は本体電源をオフにし、アダプターを充電スタンドや壁面コンセントから外して保管してください。		本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

セット内容



各部の名称

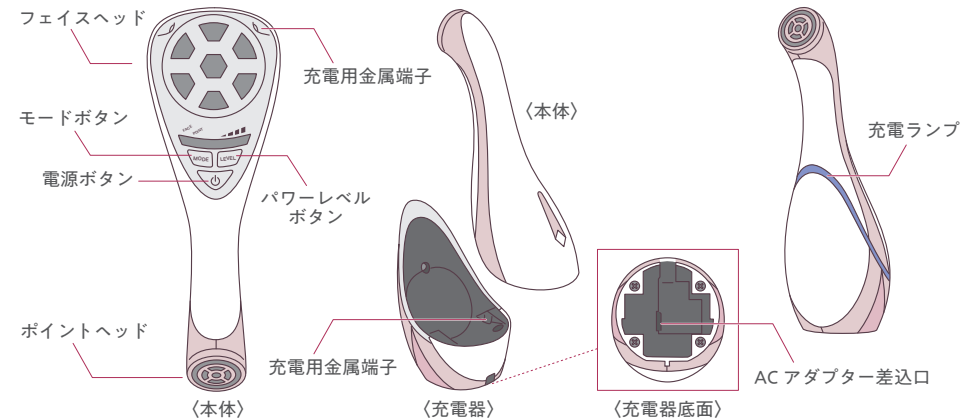

ご使用の前に

皮フ試験 (パッチテスト) の手順

●皮フ試験 (パッチテスト) は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。




- 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどで拭き取る
- 洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置する
 - 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
 - 皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない
 - 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す
- 異常の無いことを確認する
 - 48時間以内に異常がなければ、使用する
 - パッチテストの結果、異常があった場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する


充電方法

1 ACアダプターのプラグを充電器に差し込む

「ACアダプター差込口」は充電器底面（P2各部の名称を参照）にあります。


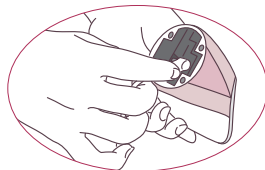


2 ACアダプターのコンセントを差し込む

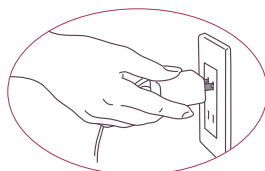

3 本体を充電器にセットする


- ・本体の電源がOFFになっていることを確認し、充電器にセットしてください。
 - ・ランプが点滅すると充電が始まります。
 - ・正しくセットされていない場合、ランプは点灯しません。
 - ・ランプの点滅が終了したら充電完了です。
- （フル充電目安：約2時間 / 約1時間連続使用可能）

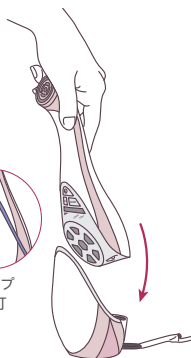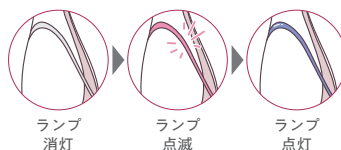

ご使用方法


1 電源を入れる

- ・電源ボタンを2秒以上長押しします。
- ・フェイスモード、パワーレベル1が選択されます。

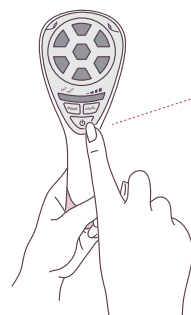


2 モードを選ぶ

- ・モードボタンで、フェイスカポイントを選択してください。
- ・モードを変えるとパワーレベルは1に戻ります。

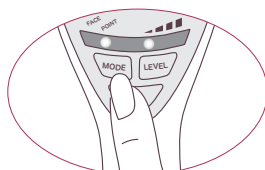

3 パワーレベルを選ぶ

- ・4段階のパワーレベルを選択できます。
- ・必ずレベル1から始め、ご自身の適切なレベルにご調整ください。

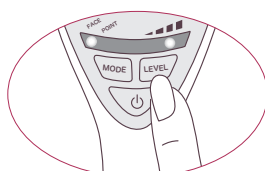

〈ご注意〉

- ・強い刺激や痛みを感じる場合はご使用をお控えください。

4 フェイスヘッドを使う

- ・モードボタンで「FACE」モードを選択します。
- ・お顔の広い範囲を効率よくトリートメントします。
- ・フェイスヘッド全体にジェルを塗布します。
- ・ご使用になる部位に専用美容液ジェルを薄く塗布していただくと、より滑らかにお使いいただけます。
- ・ゆっくりと円を描くようにトリートメントを始めます。
- ・1回2～3分が目安です。



〈ご注意〉

- ・洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。
- ・乾いた肌に使用しますと、滑りにくくなり、肌トラブルの原因となります。
- ・湿気の多い場所や浴室内ではご使用にならないでください。故障の原因となります。
- ・必ず専用美容液ジェルをご使用ください。



〈ご使用後〉

- ・ご使用後は必ず電源をお切りください。（電源ボタンを2秒以上長押しします）※10分使用で自動的に電源が切れます。（モードを変更するとタイマーはリセットされます。）
- ・ご使用後は本体に残ったジェルを必ずよく拭き取ってください。細かい隙間は綿棒などを使うと綺麗に拭き取ることができます。
- ・本体の気になる汚れはかたくしぼったタオルや、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。
- ・お肌に残った美容液ジェルはそのままお肌に馴染ませるか、余分なジェルは拭き取ってください。


※故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。

5 ポイントヘッドを使う

- ・モードボタンで「POINT」モードを選択します。
- ・気になる細かい部分を効率よくトリートメントします。
- ・ポイントヘッド全体にジェルを塗布します。
- ・ご使用になる部位に専用美容液ジェルを薄く塗布していただくと、より滑らかにお使いいただけます。
- ・ゆっくりと小さな円を描くようにトリートメントを始めます。
- ・1回2～3分が目安です。

〈ご注意〉


- ・洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。
- ・乾いた肌に使用しますと、滑りにくくなり、肌トラブルの原因となります。
- ・湿気の多い場所や浴室内ではご使用にならないでください。故障の原因となります。
- ・必ず専用美容液ジェルをご使用ください。

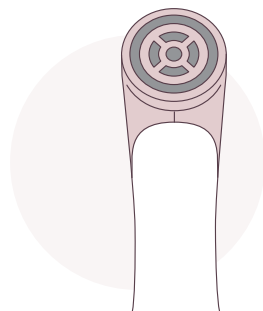

〈ご使用後〉

- ・ご使用後は必ず電源をお切りください。
(電源ボタンを2秒以上長押しします)
※10分使用で自動的に電源が切れます。
(モードを変更するとタイマーはリセットされます。)
- ・ご使用後は本体に残ったジェルを必ずよく拭き取ってください。
細かい隙間は綿棒などを使うと綺麗に拭き取ることができます。
- ・本体の気になる汚れはかたくしぼったタオルや、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。
- ・お肌に残った美容液ジェルはそのままお肌に馴染ませるか、余分なジェルは拭き取ってください。

※故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。

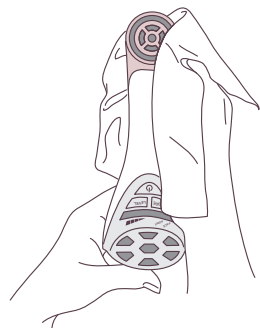


故障かな？と思ったら

- 本体が作動しない
・充電はされていますか？本体を充電器にセットし充電が完了してからご使用ください。
- 本体のランプが点灯するが作動しない
・専用の美容液ジェルを塗布されましたか？
ジェルを塗布しない場合、お肌に高周波が届かない場合があります。
- 充電ができない
・充電コードをコンセント・ACアダプター差込口に差していますか？
・本体を正しく充電器にセットできていますか？
・本体または充電器の充電用金属端子が汚れていませんか？
- 肌に痛みがある
・パワーレベルが強すぎませんか？ヘッド部とお肌を密着させてご使用ください。
専用の美容液ジェルをお使いください。

お手入れと保管方法

本体

- ・ヘッド部に残っているジェルや汚れを拭きとってから保管ください。
- ・故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。
- ・気になる汚れはかたくしぼったタオルや、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。
- ・ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

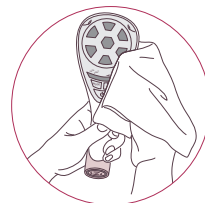

充電器

- ・内側にジェルや汚れが付着している場合は、よく拭き取ってください。
- ・故障の原因となりますので、水洗いはしないでください。
- ・気になる汚れはかたくしぼったタオルや、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。
- ・ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。



保管の仕方

- ・お客様の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光の当たる場所や、温度・湿度の高い場所には保管しないでください。
- ・浴室には置かないでください。
- ・長期間使用しない場合は、充電器からコードを外し保管ください。
(充電電池の消耗を早める場合があります)

本製品の廃棄方法について

本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。
条例の詳細内容は、各地方自治体にお問い合わせください。



アフターサービスについて

- 1: 保証書をご覧ください
保証書は所定事項を記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 2: 保証期間
お買い上げ日から1年間です。
- 3: 修理・交換を依頼されるとき
保証期間中は保証書の規定に従って無償修理いたします。商品に保証書を添えて「お問い合わせ先」までご相談ください。
保証期間を過ぎても修理はお客様のご要望により有償修理させていただきます。
「お問い合わせ先」までご相談ください。
- 4: 本品に異常があらわれた場合は、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または「お問い合わせ先」に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険ですので絶対におやめください。分解された際の怪我・故障に關しましては、保証対象外となり、当社では一切の責任は負いかねます。